


SL - D30B MASSAGE

Massage Back Cushions

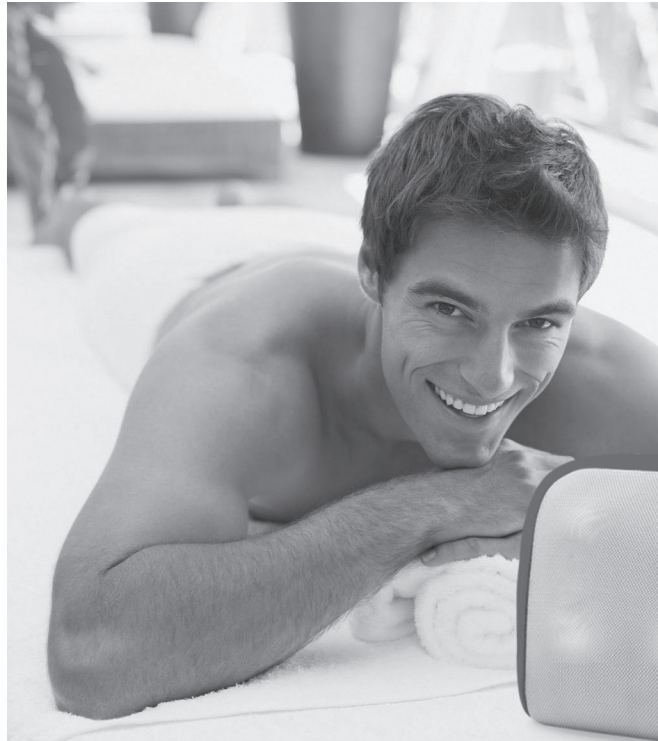

۱. بالشت ماساژ با ۴ گوی ماساژ که قابلیت گردش بر خلاف جهت عقربه ساعت است را دارا می باشد
۲. دارای برنامه گرمایشی
۳. دارای ۲ جفت سری بزرگ و ۲ جفت سری کوچک
۴. هر دو برنامه گرمایی و ماساژ درمانی قابلیت استفاده به صورت جداگانه و یا همزمان را دارا می باشند
۵. قابلیت استفاده برای بالاتنه، شکم، ران، ساق پاها و کف پا

72F0206 - D30B - A



Massage
Function



لطفاً برق ورودی را با برق دستگاه چک کنید
 لطفاً از قرار دادن دستگاه در محل های نمناک مانند حمام، استخر، سونا خودداری کنید .
 لطفاً از قرار دادن دستگاه در نزدیکی حرارت خودداری کنید .
 لطفاً از دستگاه زمانی که روکش ها یا کاورها آسیب دیده اند استفاده نکنید. آسیب دیدگی کاورها باید فوراً تعمیر شود .
 لطفاً قبل از اتصال کابل به برق مطمئن شوید کلید دستگاه خاموش است .
 لطفاً با دست خیس اقدام به وصل برق نکنید و سیم را نکشید .
 لطفاً بعد از استفاده کلید دستگاه را خاموش کنید و به صورت صحیح از برق خارج کنید .
 قسمت هایی از دستگاه ممکن است بعد از استفاده طولانی گرم شوند افرادی که به گرما حساسیت دارند نباید از دستگاه به مدت طولانی استفاده کنند .
 دستگاه ممکن است در حال استفاده طولانی برای جلوگیری از گرم شدن اجزاء داخلی خاموش شود دستگاه مجدداً بعد از خنک شدن شروع به کار می کند .
 کودکان زیر ۱۴ سال بدون مراقب نباید از دستگاه استفاده کنند .
 زنان حامله و خانمها در دوران قاعدگی نباید از این دستگاه استفاده کنند .
 برای جلوگیری از خسارت اگر آداپتور دستگاه دچار آسیب شد باید فوراً توسط نمایندگی تعویض شود ،
 این دستگاه برای استفاده افراد با ناتوانی جسمی یا ذهنی ساخته نشده مگر آنها تحت نظارت یا مراقبت افراد کفیل خود باشند
 کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند

مشکلات احتمالی و راههای رفع آنها :

<p>۱- سیم را چک کنید که کاملاً متصل باشد ۲- دکمه گرمکن را روشن کنید . ۳- کمی صبر کنید تا گرمکن گرم شود .</p>	<p>۱- سیم کامل متصل نیست ۲- کلید گرمکن روشن نیست ۳- دما از ابتدا بالا نیست</p>	<p>هنگامی که برق متصل است دستگاه کار نمی کند چراغ های گرمایشی روشن نمی شوند . گرمایش کار نمی کند .</p>
<p>دستگاه را به مدت ۳۰ دقیقه خاموش کنید .</p>	<p>مدت استفاده زیاد باشد .</p>	<p>صدای ماساژور در هنگام استفاده زیاد شود .</p>
<p>۱- برق را چک کنید . ۲- دستگاه را خاموش کنید . هنگامی که دستگاه خنک شد دوباره استفاده کنید .</p>	<p>۱- قطع برق ۲- ممکن است به دلیل گرم شدن اجزاء داخلی به علت استفاده بیش از حد دستگاه خاموش شود</p>	<p>دستگاه ناگهان در هنگام استفاده از کار کردن بایستد .</p>

مشخصات دستگاه

Product Name: Massage Back Cushion
 Rated Voltage: DC12v
 Rated power: 30w
 Structure safety