

iRest® ■ ■ ■

— نهایت آرامش —

SL-A90-Z Massage Chair **OPERATION INSTRUCTIONS**



از این منوئال نگهداری کنید.

W-07/0

Products refer to the actual product, without prior notice.

مشخصات محصول

مدل: SL-A90

نام: مندلی ماساژ

پیگر بندی: Z

میزان ولتاژ: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

میزان قدرت ورودی: 150W

مدت زمان: 20Min

ساختار ایمنی: کلاس I

توضیح جنس مندلی، PVC, PA: قطعات آهنی و الکتریکی

-ctron parts

جنس	PU	چرم	پارچه	چوب


با تشکر فراوان از خرید این محصول، لطفاً پیش از استفاده، این دستور کاربری را به منظور بهره‌وری بیشتر به دقت مطالعه فرمایید. لطفاً به اخطارهای ایمنی توجه بیشتری کرده و این دفترچه راهنما برای استفاده آتی نگهداری نمایید.

توجه: کمپانی ما حق اصلاح طراحی و توضیحات این محصول را بدون هیچ‌گونه پیش‌اعلان داراست. ارجاع آن رنگ واقعی محصول است.

فهرست

۰۲	ایمنی و نگهداری
۰۴	نام و عملکرد اجزا
۰۵	کارکرد و کارایی
۰۶	روش استفاده
۱۳	مشخصه محصول

قرار دادن مندلی سنگین بر روی زمین به مدت طولانی می‌تواند به کف پوش آسیب برساند پس لطفاً از فرش یا هر چیز دیگری برای جلوگیری از این مسئله استفاده کنید.

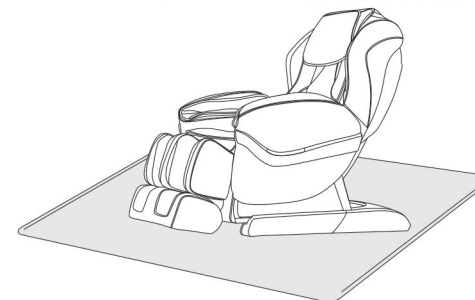


مندلی را با چرخ‌هایش روی سرامیک یا پارکت یا روی سطح ناهموار حرکت ندهید. دو نفر می‌باید همزمان باهم مندلی را بلند کنند. در حین بلند کردن آن، نقاط کانونی مندلی می‌باید شیارهای روکش تکیه گاه صافه جلو باشند. (لطفاً دسته بغل را مستقیماً بلند نکنید)



احتیاط

اطمینان حاصل نمایید که تمامی سیم‌ها به اندازه کافی از زمین فاصله داشته باشند. تکیه گاه را تا یک درجه مشخص به سمت عقب کج کنید (به طوری که سنگینی آن روی چرخ‌ها باشد)، مندلی را به سمت جلو یا عقب هل دهید و در نهایت مندلی را به حالت اولیه خود برگردانید.

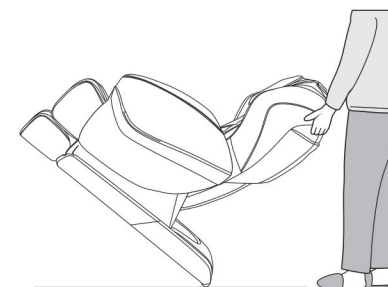

پیش از حرکت دادن مندلی ابتدا می‌باید سوکت کنترل و سیم اصلی برق را از دستگاه جدا کنید.



توجه

⚠️ خطرات مهم ایمنی

- به کودکان اجازه لمس قسمت‌های متحرک این محصول را ندهید.
- لطفاً از سیستم اتصال به زمین متناسب با این محصول استفاده نمایید.
- لطفاً پس از استفاده و یا پیش از تمیز کردن دو شاخه را از برق بکشید تا از هرگونه جراحت و یا آسیب به دستگاه جلوگیری شود.
- لطفاً طبق دستورالعمل‌های این دفترچه از محصول استفاده نمایید.
- از لوازم جانبی که توصیه نشده است استفاده ننمایید.
- در فضای بیرونی از این محصول استفاده نکنید.
- لطفاً پیش از استفاده، این دستورالعمل کاربری را به دقت مطالعه فرمایید.
- هرگونه استفاده که در این دفترچه راهنما ذکر نشده باشد ممنوع است.
- در هر نوبت، ۲۰ دقیقه استفاده توصیه می‌شود.
- چنانچه روکش آسیب دیده و یا پاره بود، از دستگاه استفاده ننمایید.
- چنانچه قاب شکسته بود، از دستگاه استفاده ننمایید.
- چنانچه روزه‌های گردش هوا روی قاب پشت گرفته و یا پوشیده شده باشد از دستگاه استفاده نکنید.
- لطفاً چیزی را بر روی این محصول پرتاب نکنید.
- دقت داشته باشید که در هنگام استفاده از محصول به خواب نروید.
- در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.
- تا یک ساعت پس از مصرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.
- برای جلوگیری از جراحت، لطفاً قدرت عملکرد ماساژ را بیش از حد بالا نبرید.

محیط استفاده

- لطفاً در دمای بالا و یا مرطوب مانند حمام از مندلی استفاده نفرمایید.
- لطفاً بلافاصله پس از تغییر ناگهانی دمای محیطی از مندلی استفاده نفرمایید.
- لطفاً در شرایط محیطی سخت و غبار آلود از مندلی استفاده نفرمایید.
- مندلی را در فضاهای کوچک که دارای تهویه مناسب نیستند نصب ننمایید.

افرادی که مجاز به استفاده از مندلی‌های ماساژور نیستند:

- افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستند.
- افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند و یا اشخامی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می‌باشند.
- افرادی که دچار تب هستند.
- خانم‌ها در دوران بارداری و یا قاعدگی
- افرادی که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.
- کودکان زیر ۱۴ سال و یا افرادی که تعادل روانی ندارند نمی‌باید بدون حضور یک ناظر از این دستگاه استفاده کنند.
- افرادی که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند.
- افراد با بدن خیس
- این وسیله یک رویه گرم دارد اشخامی که به گرما حساس هستند می‌باید در زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند.

روش استفاده


- پس از اینکه محور ارتباطی نصب شد، با استفاده از کنترل، قسمت کمر را به حالت اول درآورد (شکل ۵)، سپس ساق پا را نصب کنید.



شکل 5

۵. نصب قسمت ساق پا

- ابتدا محور متحرک را بر محور ثابت نصب کنید، دقت کنید که با حفره همتراز باشد سپس گیره R شکل را سوار کنید (جدول ۱)
- پس از اینکه قسمت ساق پا با محور ثابت همتراز شد، آن را داخل کنید (جدول ۲)

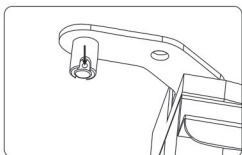


(جدول ۱)




(جدول ۲)

- سنجاق R شکل را وارد کنید، سپس آن را به طرف دیگر قسمت ساق پا انتقال دهید (جدول ۳)
- نصب قسمت ساق پا کامل است (جدول ۴)

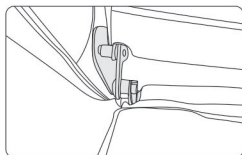


(جدول ۳)

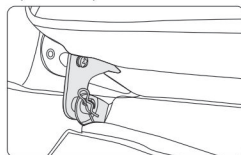

(جدول ۴)


۶. استفاده از پد بالشت و تکیه گاه

- استفاده از بالشتکها می‌تواند فشار ماساژ بر روی شانه و گردن را کاهش دهد و این بستگی به خواسته شما دارد که مایل به استفاده از آن باشید یا خیر. (بالشت‌های سر توصیه می‌شوند). کوسن کمر و تکیه گاه توسط یک زیپ به هم متصل شده‌اند (۱)، کوسن سر و تکیه گاه نیز توسط یک نوار چسب به هم متصل هستند.

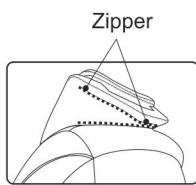

(۱)

۱۲

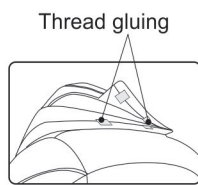

(۲)

راه کارهای ساده برای اشکالات احتمالی

- اگر موتور هنگام کار کمی تولید صدا کند طبیعی است.
- اگر کنترل به حالت نرمال کار نکرد لطفاً سوکت کنترل پدل را چک کنید تا از اتصال صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید. چنانچه زمان کاری دستگاه به اتمام رسد، مندی به طور اتوماتیک خاموش می‌شود. چنانچه محصول برای مدت طولانی به صورت مداوم کار کند محافظ دما دستگاه را به طور خودکار خاموش می‌نماید. حداقل زمان استراحت دستگاه تا استفاده بعدی می‌باید نیم ساعت باشد.

ایمنی

- ولتاژ را چک کنید تا مناسب با مشخصه دستگاه باشد.
- با دست‌های خیس دوشاخه را از برق نکشید.
- به منظور اجتناب از شوک الکتریکی و یا صدمه به دستگاه اجازه ندهید آب داخل دستگاه شود.
- به سیم‌ها صدمه نزنید و سیم بندی دستگاه را تغییر ندهید.
- از پارچه خیس برای تمیز کردن قسمت‌های الکتریکی مانند کلید و دوشاخه استفاده نکنید.
- از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراثیم نپسند.
- در زمان عملکرد غیر عادی دستگاه از آن استفاده نکنید و لطفاً بلافاصله با نزدیکترین شعبه نمایندگی خود مشورت کنید.
- در صورت بروز هرگونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از مندی، با پزشک معالج خود مشورت کنید.
- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدمات و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.


تعمیر و نگهداری

- این محصول می‌باید توسط متخصصان مربوط تعمیر شود، کاربران مجاز به انجام تعمیرات و باز کردن محصول نیستند.
- پس از اتمام کار با دستگاه حتماً پریز آن را از برق خارج نمایید.
- چنانچه دو شاخه‌های پریز شل شده باشد از مندی استفاده نکنید.
- چنانچه این محصول به مدت طولانی بلا استفاده بماند لطفاً سیم آن را جمع کنید و این محصول را در محیطی خشک و عاری از گرد و غبار نگهداری نمایید.
- در دمای بالا و یا نزدیک آتش از این محصول استفاده نکنید و آن را در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طولانی قرار ندهید.
- چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدماتی آن و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.
- لطفاً این محصول را با پارچه خشک تمیز نمایید. از تینر، بنزین و یا الکل استفاده نفرمایید.
- اجزای مکانیکی این محصول طراحی و ساخت مخصوص دارند و نیاز به هیچگونه دستکاری ندارند.
- با اشیاء تیز و لبه دار به مندی فشار وارد نکنید.
- این محصول را بر روی سطوح ناهموار نکشید باید پیش از حرکت، آن را از زمین بلند کنید.
- بهتر است با فاصله زمانی از مندی استفاده شود تا مندی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار نکند.

روش استفاده


• خاموش کردن کل دستگاه

شکل (دکمه خاموش)

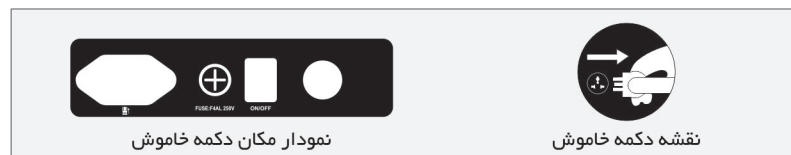


توجه :

زمانی که دستگاه در حال کار است و قسمت ساق پا در حال بالا و پایین آمدن است نباید روی ساق پا فشار بیاورید زیرا باعث آسیب دیدن می‌شود.

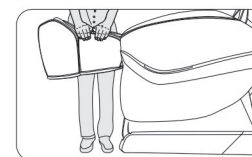


۴. نصب محور ساق پا

• پک را باز کنید (شکل ۱)، دستگاه را روشن کنید، با استفاده از کنترل دستی صندلی را به حالت (شکل ۲) درآورید.

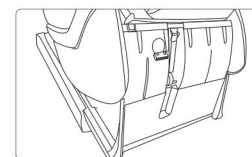


شکل ۱

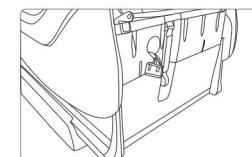


شکل ۲

• محور ساق پا را از داخل نشیمن گاه در بیاورید، با سوراخ همتراز کنید، پین را داخل رول قرار دهید (شکل ۳)

• نصب کامل است (شکل ۴)

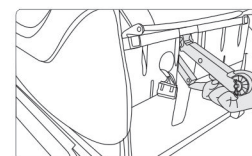


شکل ۳

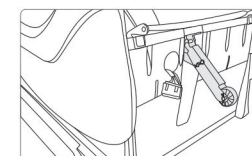

شکل ۴

نام و عملکرد اجزا

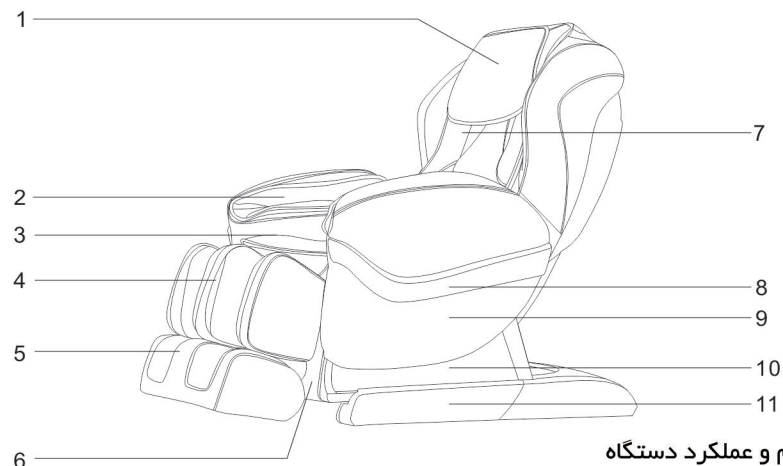

نام و عملکرد دستگاه

۱. پیلوپد

۲. اجزای ایربگ دست

۳. کوسن نشیمنگاه

۴. روکش ساق پا

۵. روکش کف پا

۶. قاب جلویی صندلی

۷. روکش تکیه گاه

۸. زه دسته بغل

۹. دسته بغل صندلی

۱۰. قاب بغل

۱۱. قاب بغل پایین

۱۲. قاب پشت

۱۳. کنترل پتل

۱۴. قاب روی مین برد

۱۵. چرخ متحرک


۱۶. سیم و دو شاخه برق

۱۷. سوکت برق




۱۸. جعبه فیوز

۱۹. کلید برق

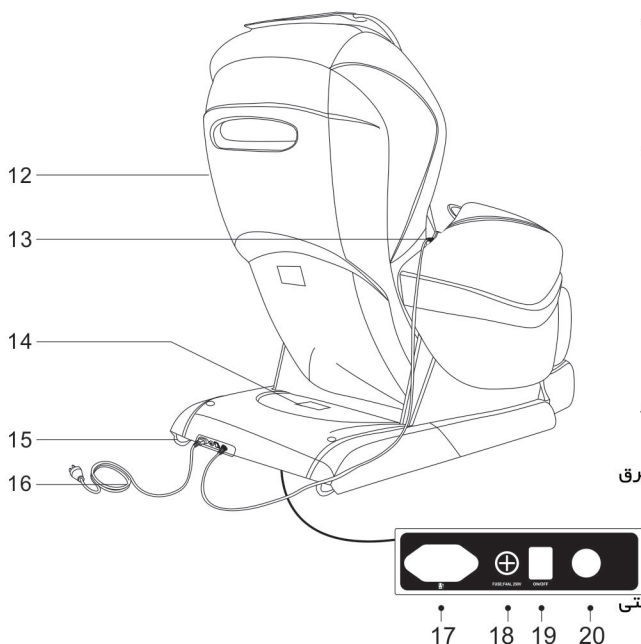۲۰. سوکت کنترل دستی






• سایر عملکردهای دستی

Function	Button	Description
کلید بالابردن		این دکمه را فشار دهید، تکیه‌گاه به آرامی بالا می‌رود و ساق پا، پائین می‌رود. زمانیکه آن را رها کنید متوقف می‌شود. اگر تا انتها بالا بیاید متوقف می‌شود و صدای "di-di-di" می‌دهد.
کلید پائین آوردن		این دکمه را فشار دهید، تکیه‌گاه به آرامی پائین می‌آید، ساق پا، بالا می‌رود. زمانی که آن را رها کنید متوقف می‌شود. اگر تا انتها پائین بیاید متوقف می‌شود و صدای "di-di-di" می‌دهد.
حالت اتوماتیک خوابیدن		حالت‌ها با هر بار فشار دادن دکمه تغییر می‌کنند، در کل سه حالت وجود دارد.

۳. خاموش کردن، اتمام ماساژ

- کلید قرمز را در طول پروسه ماساژ فشار دهید، تمامی عملکردهای ماساژ به یکباره متوقف می‌شوند تکیه‌گاه و ساق پا به شکل اتوماتیک به حالت اولیه خود برمی‌گردد. در این حین شما می‌توانید آپشن حافظه را ذخیره کنید. پس از اتمام زمان وارد شده، تمامی عملکردهای ماساژ خاتمه می‌یابند. در این اثنا شما می‌توانید آپشن حافظه را فعال کنید اما تکیه‌گاه و ساق پا به حالت اولیه خود بر نمی‌گردند.
- کارایی ذخیره ماساژ: بعد از زمان تنظیم شده یا خاموش کردن، کنترل دستی واژه "حافظه" را نشان می‌دهد و می‌درخشد تا به کاربر یادآوری کند دکمه‌های M1, M2, M3 را برای ذخیره ماساژ بزند یا اینکه دوباره دکمه پاور را بزند و مندلی خاموش شود و قسمت‌های پشت، پا به حالت اولیه برگردد یا اینکه ۱ ثانیه صبر کنید و مندلی به صورت خودکار متوقف می‌شود و قسمت‌های پشت، پا به حالت اولیه برگردد.

Function	Button	Display
Memory massage		SA 1 Memory
		SA 2 Memory
		SA 3 Memory

- دارای طراحی چهار گوی با حرکت عمودی و بی صدا که سیستمی هوشمند از ماساژ دست است.
- دارای طراحی روش‌های تقلیدی از ماساژ شیاتسو، مالشی، ضربه‌ای، ترکیب همزمان ضربه‌ای و مالشی
- دارای ۵ عملکرد خودکار ماساژ: راحتی، تسکین، رفع خستگی، گردن و شانه، میان تنه
- دارای عملکرد ذخیره ماساژ برای سه فرد مختلف
- ماساژ دستی برای بالا تنه با ۵ آپشن: ثابت، بخش‌بی، کلی، شانه و گردن، کمر و میان تنه. هر روش ماساژ با ۳ سطح قابل تنظیم است. در حالت ماساژ ثابت، گوی‌های ماساژ می‌توانند بالا و پایین بروند. در حالت ضربه‌ای، شیاتسو و ضربه‌ای مشت، عرض میان دو گوی مالشی در ۳ سطح عریض، متوسط و باریک قابل تنظیم است.
- عملکرد ماساژ کیسه هوا در ۳ حالت: فشار هوا روی کل بدن، بازوها (کیسه هوا)، قسمت ساق پا (۲۰ کیسه هوا)، همراه با ۳ شدت انتخابی
- دارای عملکرد ماساژ رولینگ در کف پا، دو جفت گوی چرخشی برای انگشت‌ها و ماساژ سوزنی برای پاشنه پا
- عملکرد گرمایش کمر: منبع گرمایشی فیبر کربن
- دارای قابلیت کشش برای ساق پا به منظور انطباق با قدهای متفاوت
- همراه با تکنولوژی جایگیری صفر که برای خوابیدن به سمت جلو حرکت می‌کند.
- تکیه‌گاه با حرکت ریلی پایین می‌رود و همزمان قسمت نشیمن گاه بالا می‌رود و به تدریج به حالت مرکز ثقل صفر درمی‌آید.
- تکیه‌گاه و قسمت پا می‌توانند همزمان باهم حرکت کرده و عملکرد تطبیقی و خودکار خوابیده انجام شود.

Function	Button	Description	Display
Back stretch		ماساژ نقطه ثابت	H0
		ماساژ حرکتی روی بعضی قسمت‌ها (بخشی)	H1
		ماساژ حرکتی روی کل بدن	H2
		ماساژ حرکتی روی بالاتنه (گردن و شانه)	H3
		ماساژ حرکتی روی پایین تنه (کمر و میان تنه)	H4
		تنظیم پوزیشن ماساژ (در نقاط ثابت و حالت‌های بخشی، پوزیشن ماساژ قابل تنظیم است).	گوی‌های ماساژ بالا می‌روند.
		گوی‌های ماساژ پایین می‌روند.	

• Air massage

Function	Button	Description	Display
Full air		ماساژ هوا روی دسته‌ها، پاها، ساق پا	Arm Feet
Arms		ماساژ هوا روی دسته‌ها	Arm
Legs		ماساژ هوا روی پاها، ساق پا	Feet
Intensity		۳ سطح قابل تنظیم	Arm Feet

• Other manual functions

Function	Button	Description	Display
Heating		توسط عملکرد گرمایش، احساس گرما پس از سه ثانیه منتقل می‌شود.	
Sole roller		گوی کف پا: سونبج گوی کف پا با سه سطح سرعت	



توجه: نمایشگرها مانند مدل واقعی
محمول هستند.

روش استفاده


۱. کلید برق روی



۲. شروع ماساژ

۱. کلید پاور را فشار دهید تا ماساژ آغاز می‌شود.
۲. مکان یابی کتف و شانه و نقاط ماساژ. لطفاً تا کامل شدن مکان یابی صبر کنید.
۳. اگر میان مکان واقعی شانه و گوی‌های ماساژ فاصله وجود داشت می‌توانید کلید بالا و پایین را برای تطبیق مکان مناسب بزنید. مکان کتف و شانه دارای ۱۰ سطح قابل تنظیم است. در صورتی که طرف ۱۰ ثانیه هیچ تنظیمی روی آن صورت نگیرد ماساژ را به طور خودکار شروع می‌کند.

Buttons	Description	Display
	گوی ماساژ را بالا می‌آورد تا به مکان مناسب برسد.	
	گوی ماساژ را پایین می‌آورد تا به مکان مناسب برسد.	

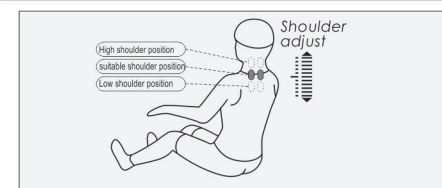

- عملکرد ماساژ را انتخاب کنید تا ماساژ آغاز شود.

- ماساژ ذخیره شده

- M1, M2, M3 را انتخاب کنید تا به مدل‌های ذخیره شده ماساژ بازگردد.

Buttons	Description	Display
	M1	مدل‌های ماساژ ذخیره شده را نشان می‌دهد.
	M2	مدل‌های ماساژ ذخیره شده را نشان می‌دهد.
	M3	مدل‌های ماساژ ذخیره شده را نشان می‌دهد.

روش استفاده

• مشخصه ماساژ اتوماتیک

Function	Button	Massage characterization	Display
کاراکترهای ماساژ اتوماتیک	RELAX	ماساژ عمیق روی نقاط طب سوزنی، تسکین درد	Auto F1
	COMFORT	تسکین عضله‌ها و استخوان‌های بدن	Auto F2
	Recovery	بهبود جریان خون	Auto F3
	Neck & shoulder	تمرکز ماساژ روی گردن و شانه	Auto F4
	Back & waist	تمرکز ماساژ روی کمر و میان تنه	Auto F5

- Upper body manual operation, lower body manual operation.

1) Upper body manual operation.

Function	Button	Adjusting of massage balls	Display
Operation	SHIATSU	سرعت، عرض (در ماساژ شیاتسو سرعت و عرض قابل تنظیم است).	
	KNEAD	سرعت (در ماساژ مالشی سرعت قابل تنظیم است).	
	TAP	سرعت، عرض (در ماساژ ضربه‌ای، سرعت و عرض قابل تنظیم است).	
	KNEAD & TAP	سرعت (در ماساژ ضربه‌ای، سرعت و عرض قابل تنظیم است).	
	KNOCK	سرعت، عرض (در ماساژ ضربه‌ای، سرعت و عرض قابل تنظیم است).	
speed	SPEED	۳ سرعت انتخابی	
width	WIDTH	۳ عرض انتخابی	