



هشدار ایمنی مهم

- هشدار ایمنی : لطفاً از این محصول مطابق با این دفترچه راهنما استفاده کنید .
- لطفاً اطمینان حاصل کنید که منبع تغذیه مناسب برای این محصول استفاده میشود، در صورت خراب بودن کابل یا سیم آن ، از این محصول استفاده نکنید.
- اجازه ندهید که هیچ ماده خارجی وارد فضای خالی بین گوی های ماساژور و پوشش شود. به هنگام وصل یا قطع کردن برق سیم را نکشید.
- به کابل آسیب نرسانید و مدار برق محصول را تغییر ندهید.
- لطفاً در صورت قطع برق از این محصول استفاده نکنید تا از آسیب دیدگی ناشی از وصل ناگهانی مجدد برق جلوگیری شود.
- از قطعات یدکی و لوازم جانبی به غیر از موارد توصیه شده استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدگی از فشار مضاعف روی موضع ماساژ خودداری کنید.
- تا یک ساعت پس از صرف غذا از این محصول استفاده نکنید.
- بمحض مشاهده کارکرد غیرمعمول و احساس ناخوشایند در هنگام استفاده از محصول ، آترا خاموش کرده و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- اگر در هنگام استفاده از محصول متوجه مورد غیرعادی و یا حتی درد در قسمت موضع ماساژ شدید دستگاه را خاموش کرده و با دکنتر خود تماس بگیرید.

نام اجزا	
این دستگاه ماساژ شامل دسته ، پایه شارژ ، کابل شارژ USB و دفترچه راهنمای فارسی میباشد.	
۱ – نشانگرشارژ:درهنگام شارژ چراغ چشمک میزند و درهنگام پرشدن باتری چراغ روشن، ثابت است.	
۲– کلید پاور: برای روشن کردن دستگاه این دکمه را فشار و برای خاموش کردن، آترا ۳ ثانیه نگه دارید.	۲
۳– نشانگر حالت ماساژ، با هر بار فشار کوتاه به دکمه پاور سرعت سربهای ماساژور و جهتشان تنظیم میشود.	۳
۴– نشانگر سرعت	۴
۵– پایه شارژر	۵

ویژگیهای عملکرد

- باتری قابل شارژ
- عملکرد تک دکمه ای
- خاموش شدن خودکار بعد از ۱۰ دقیقه
- ایمنی در استفاده از محصول
- دارای دو سرعت کم و زیاد
- دونوع ماساژ مالشی ،رو به جلو و برعکس

3

شارژ کردن

- چراغ سبز در هنگام شارژ چشمک می زند.
- چراغ سبز در هنگام پرشدن باتری ثابت میماند.
- ۲ساعت طول می کشد باتری را به طور کامل شارژ کند.
- هنگام شارژ کردن نمی توان از آن استفاده کرد.

نگهداری و ذخیره

- برای جلوگیری از فرسایش دستگاه با تابش شدید نور خورش وکترهای خورنده باید هوای داخل تهویه شود.
- برای تمیز کردن قسمت پاور دستگاه را خاموش نگه دارید.
- دستگاه را بعد از استفاده در جای امن قرار دهید و اشیاء سنگین را روی دستگاه نگذارید.
- اگر دستگاه خراب شد با خدمت پس از فروش برای تعمیر تماس بگیرید و خودتان جهت تعمیر آترا باز نکنید.
- شماره تماس های خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۸۱۹۷۴۷۹ و ۰۸۸۰۴۴۹۰۰-۰۲۱ داخلی۰۲-۱۰۷-۱۰۸

حمل

- این محصول مجهز به جعبه ضد ضربه است ، مناسب برای حمل و نقل هوایی ، راه آهن ، بزرگراه و کشتی (بعضی از کشورها شاید به گواهینامه حمل و نقل هوایی احتیاج داشته باشند).

4

نام اجزا	
این دستگاه ماساژ شامل دسته ، پایه شارژ ، کابل شارژ USB و دفترچه راهنمای فارسی میباشد.	
۱ – نشانگرشارژ:درهنگام شارژ چراغ چشمک میزند و درهنگام پرشدن باتری چراغ روشن، ثابت است.	
۲– کلید پاور: برای روشن کردن دستگاه این دکمه را فشار و برای خاموش کردن، آترا ۳ ثانیه نگه دارید.	۲
۳– نشانگر حالت ماساژ، با هر بار فشار کوتاه به دکمه پاور سرعت سربهای ماساژور و جهتشان تنظیم میشود.	۳
۴– نشانگر سرعت	۴
۵– پایه شارژر	۵

در حفظ این دفترچه راهنما کوشا باشید

72F0206-SL-C70-A

افرادی که میتوانند از محصول استفاده کنند .

- افرادی که مدت طولانی با کامپیوتر کار میکنند.
- افرادی که برای مدت طولانی در یک وضعیت ثابت قرار دارند.
- افرادی که عصبی هستند و دچار کم خوابی میباشند.
- افرادی که دچار گرفتگی گردن و خستگی عضلات هستند .

دستورالعمل

- ابتدا در یک وضعیت آرام و راحت بنشینید سپس ماساژور دستی را روی سر قراردهید و اعصاب سر را آرام کنید (مراقب باشید در هنگام ماساژ موهیتان به دستگاه گیر نکند)
- برای روشن کردن ماساژور دکمه پاور را فشار دهید.
- برای تنظیم سرعت و چرخش: با یکبار فشار کوتاه دکمه پاور دستگاه روشن میشود، بـــــــار دوم سرعت گویها بیشتر میشود،بار سوم جهت گویها عوض میشود و بار چهارم به همان جهت سرعت گویها زیاد میشود.
- برای خاموش کردن دستگاه ۳ ثانیه دکمه را نگه دارید.
- دستگاه به طورخودکار بعد از ۱۰ دقیقه کار کردن خاموش میشود.

☑ نشانگر شارژ: باتری کم: چراغ چشمک زن سبز، باتری پر: چراغ ثابت سبز

⊕ تنظیم سرعت ، چراغ قرمز ، تغییر سرعت ، چشمک زن

○ چرخش: نور آبی ، معکوس ، چشمک زن


5

iRest . . .

ماساژور مینی سر

SL-C70

دفترچه راهنمای فارسی

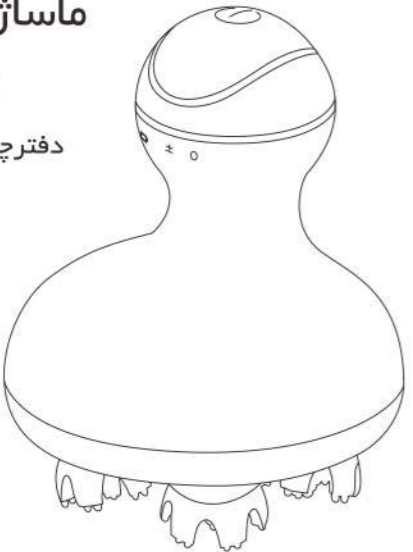

عیب یابی

- اگر در حین کار مشکلی وجود دارد ، لطفا موارد زیر را بررسی کنید. اگر مشکل حل نشده است و یا محصول هنوز نمی تواند بیهینه کار کند، لطفاً برق را قطع کنید و با دفترخدمات پس از فروش تماس بگیرید دستگاه را خودتان باز یا تعمیر نکنید .

عیب اصلی	دلیل	راه حل
دستگاه روشن نمی شود	باتری شارژ ندارد	قبل از خالی شدن باتری دستگاه را شارژ کنید

مشخصات محصول

Model: SL-C70
Name: Massage hand(Mini head massager)
Adaptor Input: 100-240V~ 50Hz/60Hz
Rated voltage: 5V==
Rated power: 5W
Rated working time: 10minutes
Product safeguard construction:

6