


iRest®

ماساژور پا



SL-C33

شروع مراقبتی عشق آمیز برای پاهایتان

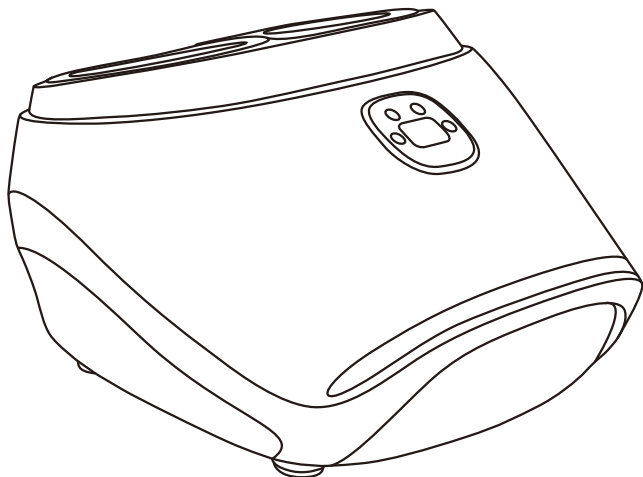

دفترچه راهنمای استفاده

این دستور العمل برای استفاده آتی بدرستی نگهداری شود.

72F0206-SL-C33-A

از خرید شما سپاسگزاریم. لطفاً بمنظور استفاده صحیح از این محصول این کتابچه راهنما را بخوبی مطالعه فرمایید و به هشدارهای ایمنی توجه کرده و برای استفاده آتی این کتابچه را بدرستی نگهداری کنید توجه: کمپانی ما حق اصلاح طراحی و توضیحات این محصول را بدون هیچ گونه پیش اعلان داراست. ارجاع آن رنگ واقعی محصول است.

فهرست

۰۲	مراقبت و نگه داری
۰۴	نام و عملکرد اجزا
۰۵	عملکرد دستگاه
۰۶	روش استفاده
۱۰	مشخصات محصول

۳. مراقبت و نگه داری

۱. تمیز کردن

- برای تمیز کردن از سیم ظرف شویی، ابزارهای ساینده و یا مواد شیمیایی مانند بنزین و استون استفاده نکنید و دستگاه را مستقیماً داخل آب نگذارید.
- دستگاه را از برق بکشید.
- جهت تمیز کردن سطح دستگاه و قسمت کنترل از پارچه ی خشک استفاده کنید.
- از پارچه ی خیس و یا آغشته به موادشیمیایی استفاده نکنید.

۲. نگهداری

- دستگاه را از برق بکشید
- دستگاه را در جای خشک و خنک دور از تابش خورشید نگه دارید.
- وسایل سنگین وزن روی دستگاه قرار ندهید.

۳. تعویض قطعات

در صورت آسیب دیدن بدنه و یا قطعات مکانیکی، دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

۴. خدمات پس از فروش

برای اطلاعات بیشتر و یا هرگونه سوال پیرامون محصول لطفاً با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

دفتر مرکزی: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ضلع شمال غربی تقاطع پل کردستان،

بن بست فرشید، پلاک ۴، طبقه ۵، واحد ۱۰

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۴۴۹۰۰۰

آدرس سایت: www.irest.ir

اینستاگرام: [irest_co](https://www.instagram.com/irest_co)



هشدار های مهم ایمنی

۱. هشدارهای ایمنی

- لطفاً از این محصول طبق دفترچه راهنما استفاده شود.
- لطفاً از سالم بودن سیم برق اصلی قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید. و در صورت آسیب دیدن سیم برق از استفاده ی آن خود داری فرمایید.
- اجازه ی ورود هیچ گونه جسم خارجی را به فضای بین سری ماساژ و بدنه دستگاه ندهید.
- اجازه ندهید که آب وارد دستگاه شود تا از هرگونه سانحه ای به دلیل جریانات مداری پیشگیری شود.
- لطفاً برق دستگاه را بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن به منظور پیشگیری از هرگونه جراحت و یا خسارت قطع کنید.
- دستگاه را با دست خیس به پریرز برق نزنید.
- لطفاً دستگاه را با کشیدن سیم آن از برق نکشید.
- مراقب باشید که به سیم دستگاه آسیب نزنید و مدار برق را تغییر ندهید.
- به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی در صورت قطعی برق از دستگاه استفاده نکنید
- غیر از قطعات یدکی مجاز و توصیه شده از قطعه ی یدکی دیگری استفاده نکنید.
- در فضای بیرون از دستگاه استفاده نکنید.
- جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی دستگاه را با فشار ماساژ زیاد استفاده نکنید
- تا یک ساعت پس از مصرف غذا از محصول استفاده نکنید.
- اگر هنگام استفاده از محصول متوجه نکته ی غیر عادی شدید، دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
- اگر در هنگام استفاده از محصول درد و یا فشاری احساس کردید، آن را خاموش کرده و با دکتر خود تماس بگیرید.
- این دستگاه برای کودکان و یا افرادی که توانایی پایین فیزیکی و ذهنی دارند طراحی نشده است مگر با نظارت دقیق شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد، مراقب باشید کودکان با دستگاه بازی نکنند.



- اگر آداپتور دچار آسیب دیدگی گردد، جهت جلوگیری از خطرات احتمالی باید توسط کارشناسان خدمات پس از فروش تعویض گردد. در این صورت لطفاً با خدمات پس از فروش مجاز تماس حاصل فرمایید.

۲. محیط استفاده

- در محیط های دارای رطوبت بالا مانند حمام از این دستگاه استفاده نفرمایید.
- در محیط غبارآلود و یا آلوده با گاز های سمی از دستگاه استفاده نفرمایید.
- ۳. افرادی که مجاز به استفاده از محصول نیستند
 - خانم ها در دوران بارداری و قاعدگی
 - افرادی که دچار بیماری های پوستی واکیر دار هستند .
 - افراد دارای پوکی استخوان
 - افرادی که تب دارند.
 - افرادی که دارای جراثیم و یا بیماری در سطح پوست هستند.
 - کودکان زیر ۱۴ سال و افرادی که تعادل روحی و روانی ندارند بدون کمک ناظر مجاز به استفاده از دستگاه نمی باشند.

- افرادی که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند و یا تحت درمان هستند.
- افراد با بدن خیس

- افرادی که مست هستند و یا هوشیار نیستند.


- اگر اخیراً تحت عمل جراحی بوده اید قبل از استفاده از محصول با پزشک مشورت کنید.

- دستگاه دارای سطحی گرم است افرادی که به گرما حساسیت دارند برای استفاده باید مراقب باشند.

هشدار های ایمنی



- این دستگاه خیلی محکم نیست، بالارفتن، ایستادن و پریدن کودکان بر روی دستگاه ممنوع است. در این صورت باعث سنگین شدن یک طرف دستگاه و آسیب به دستگاه و یا آسیب های فردی می گردد.

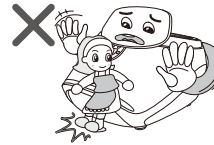

روش استفاده

۲. عیب یابی

۱. در این قسمت بطور خلاصه متداول ترین مشکلاتی که ممکن است در هنگام استفاده با آن برخورد کنید آورده شده است ، اگر با توجه به اطلاعات زیر نتوانستید مشکل دستگاه را حل کنید

لطفاً با دفتر خدمات پس از فروش با شماره ۰۸۸۰۴۴۹۰۰ - ۰۲۱ - داخلی ۲ یا موبایل

۰۹۱۲۸۱۹۷۴۷۹ تماس بگیرید.

۲. اگر با مشکلاتی مواجه شدید که در لیست ذکر نشده است ، ابتدا مراحل زیر را امتحان کنید:

- محصول را خاموش کرده و آنرا از برق بکشید

- دستگاه را حدود ۶ دقیقه خاموش نگه دارید.

- دستگاه را به برق وصل کنید و مجدداً آن را روشن کنید.

مشکل	دلیل	راه حل
دستگاه کار نمی کند	دستگاه به درست به برق متصل نشده و یا دکمه ی سوییچ روشن نشده است.	چک کنید دکمه ی سوییچ روشن باشد. چک کنید ولتاژ محل استفاده با ولتاژ دستگاه هماهنگ باشد. دستگاه را به برق بزنید.
	زمان ۱۵ دقیقه ای خودکار دستگاه اتمام یافته و دستگاه در حالت آماده به کار قرار گرفته است.	دکمه ی پاور را دوباره فشار دهید.
	شما بیشتر از ۴۵ دقیقه از دستگاه استفاده کرده اید و دستگاه بدلیل داغ کردن خاموش شده است.	دستگاه را از برق بکشید و قبل از استفاده ی مجدد اجازه دهید به مدت ۱ ساعت دستگاه خنک شود.
دستگاه به طور غیر عادی گرم است	فشار زیادی به دستگاه وارد شده و دستگاه به دلیل فشار بیش از حد خاموش شده است.	دستگاه را از برق بکشید و فشار را قبل از استفاده ی مجدد کم کنید.
	حالت گرمایشی روشن است.	حالت گرمایش را خاموش کنید.
دستگاه صدا می دهد.	دستگاه به دلیل استفاده ی بیش از ۴۵ دقیقه داغ شده است.	بعد از هر بار استفاده دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید خنک شود.
	دستگاه بدلیل ساختار مکانیکی اش در هنگام کار کردن صدا دار است.	این صدا نرمال است و نشان دهنده ی آسیب دستگاه نمی باشد.



دکمه	توضیحات
 Switch روشن / خاموش	دکمه ی سوئیچ در صورتی که پاور روشن است، از این دکمه برای خاموش یا روشن کردن کامل دستگاه استفاده کنید. حالت پیش فرض در زمان روشن شدن حالت اول است. (زمان پیش فرض ۱۵ دقیقه است)
 Mode حالت	در صورت روشن بودن دستگاه این دکمه را لمس کنید تا حالت های اول، دوم و سوم قابل انتخاب باشد. حالت اول: رولینگ ها و لرزاننده ها به آهستگی حرکت می کنند و کیسه های هوا با قدرت عمل می کنند و چراغ نشانگر روشن است. حالت دوم: حالت ترکیبی از سرعت رولینگ هاست که شامل دو سوم حرکت سریع و یک سوم حرکت آهسته می باشد. کیسه های هوا با قدرت کار می کنند و چراغ نشانگر روشن تر است. حالت سوم: رولینگ ها و لرزاننده ها غیر فعال اند، کیسه های هوا با تمرکز بیشتری کار می کنند و چراغ نشانگر روشن تر است.
 Heating گرمایش	گرمایش: از این گزینه برای فعال کردن سیستم گرمایشی استفاده کنید. هنگام فعال ساختن چراغ نشانگر روشن می شود و با فشار مجدد دکمه این حالت خاموش شده و چراغ نشانگر نیز خاموش می شود. (دکمه ی پاور در قسمت گرمایش روشن است) شدت: هنگامی که دستگاه در حال کار است توسط این دکمه ۳ حالت ماساژ متوسط، ضعیف و قوی را می توانید انتخاب کنید. در حالت ماساژ قوی چراغ نشانگر ۶ خط را نشان می دهد، در حالت متوسط چراغ نشانگر ۴ خط را نشان می دهد و در حالت ضعیف چراغ نشانگر ۲ خط را نشان می دهد. (حالت پیش فرض حالت متوسط است)
 Intensity شدت	(توضیحات در جدول بالا)

توجه

زمانی که به ندرت از دستگاه استفاده می کنید، دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.

هنگام ماساژ و بعد از ماساژ به طور مستقیم روی دستگاه نایستید. (جهت جلوگیری از

آسیب دیدگی دستگاه و از کار افتادن آن)

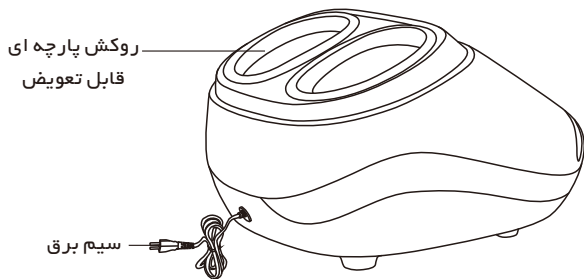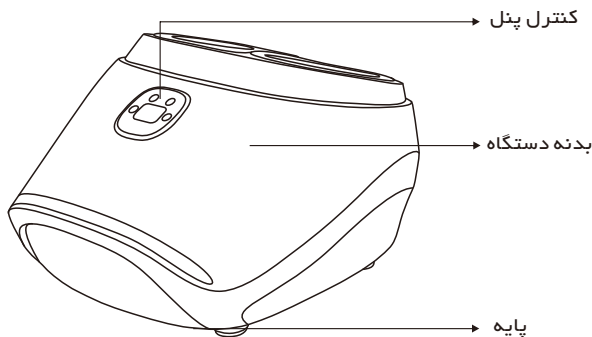

- با توجه به طراحی ارگونومیک و طراحی خاص ظاهری، این دستگاه با نقاط فشاری پای انسان ترکیب شده و ماساژ بسیار راحتی را در سرتاسر پای انسان ایجاد می کند. این دستگاه دارای طراحی مدرن، سبک و قابل حمل می باشد.
- دستگاه به طور کامل مجهز به ایربگ می باشد تا ماساژ موثری در پای انسان ایجاد کند و فشار را از روی نقاط فشاری پای انسان بردارد.
- این دستگاه دارای ماساژ رولینگ کف پا می باشد که تجربه ی ماساژی آرامش بخش را به شما یادآور می شود.
- دستگاه دارای عملکرد سیستم گرمایشی که با استفاده از مکانیزم گرمایشی مادون قرمز باعث ایجاد ماساژ گرمایشی لذت بخشی می شود.
- دستگاه دارای دکمه ی حالت اتوماتیک می باشد. (حالت اول: رولینگ ها و لرزاننده ها به آرامی حرکت می کنند و ایربگ ها به طور کامل فعال هستند، حالت دوم: رولینگ ها دارای سرعت ترکیبی هستند. به این صورت که دو سوم سریع و یک سوم آهسته حرکت می کنند، ایر بگ ها با قدرت فعالیت می کنند.
- حالت سوم: رولینگ ها و لرزاننده ها غیر فعال هستند و کیسه های هوا به طور متمرکز فعالیت می کنند.) هر سه حالت قابل تغییر است و در هر سه حالت کیسه های هوا قابل تنظیم می باشند.
- هر بار که دکمه ی سوییچ فشرده شود صدای دیپ به گوش می رسد.
- بعد از ۱۵ دقیقه ماساژ، تمام عملکردهای ماساژ به طور خودکار خاموش می شود.
- روکش پارچه ای توسط زیپ می تواند از دستگاه جدا شود، تا بتوان به سادگی آن ها را تمیز و بهداشتی نگه داشت (توسط کارشناسان فنی شرکت)

۱. قبل از ماساژ این روشها را به کار بگیرید
- مرحله ی اول: دوشاخه را به پریز برق دارای جریان AC با خروجی ۱۰۰ - ۲۴۰ ولت متصل نمایید.



قبل از اتصال به پریز از سالم بودن سیم برق اطمینان حاصل فرمایید.

با دست خیس سیم برق را به پریز متصل نکنید.
مرحله ی دوم: یک صندلی مناسب جهت نشستن و قراردادن پاهای

خود در ماساژور پا انتخاب کنید. (مطابق شکل سمت راست)
مرحله ی سوم: دکمه switch را فشار دهید و گزینه ی ماساژ
پیش فرض را انتخاب کنید



بعد از استفاده

- ◀ دکمه switch را فشار دهید.
- ◀ هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دستگاه را از برق بکشید.

کنترل پنل

