


iRest®

TWO-TIER C801

LEG BEAUTICIAN WITH ROLLOR
operation instructions

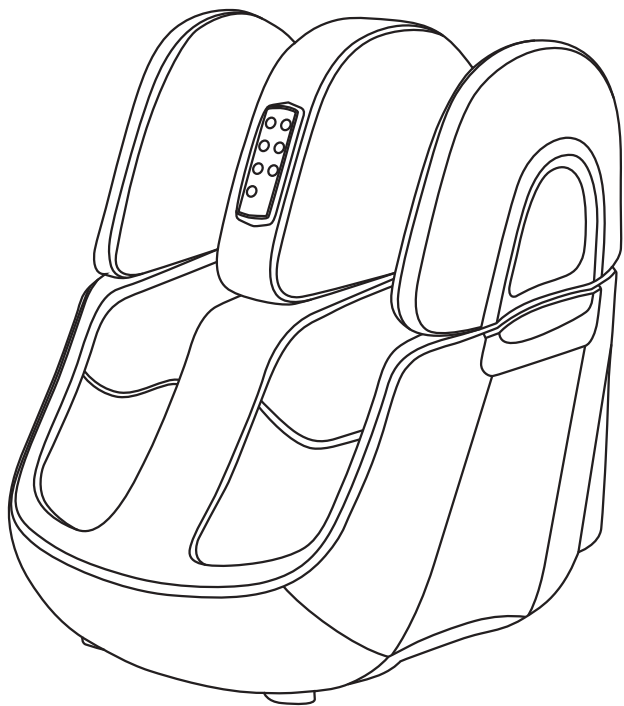

مشخصات محصول

نام	ماساژور پا با گوی
مدل	C801
میزان ولتاژ	110-120V~ 60Hz □ 220-240V~ 50Hz/60Hz □
میزان قدرت	100 W
مدت زمان	۲۰ دقیقه
ساختار ایمنی	□

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Note: our company reserved the rights of product's design and explanation.
Please check with us before order, we may change outlook design without notice.

روش استفاده

• سیم را به پلاگ وصل کنید، چراغ نشانیگر قدرت نشانی می دهد، سپس به وضعیت استندبای در میاید.



• نمودار وصل کردن دوشاخه



• پاور سویچ

	قدرت: سوییچ قدرت کنترل محصول. وقتی شروع می شود، شما صدای "بی" می شنوید و تمام عملکردها آماده به کار را می شوند (روشن / خاموش، تنظیم مجدد ماساژ کف پا)
	گرمایش: عملکرد گرمایش. کنترل منحصر به فرد، هنگامی که کار می کند، چراغ نشانگر آبی است.
	قدرت: کنترل قدرت ماساژ محصول، دکمه بعد از شروع عملکرد ماساژ استفاده می شود. سه قدرت: سبز ضعیف است، آبی متوسط است، قرمز قوی است. قدرت به طور پیش فرض در هنگام ورود به محصول متوسط است
	کف پا: کنترل ماساژ کف پا، تمرکز ماساژ رو کف پاست. وقتی کار می کند نور آبی است.
	پا: ماساژ پا را کنترل می کند، تمرکز ماساژ روی پا، نور هنگام کار آبی روشن است.
	زیبایی پا: به طور خودکار پا را ماساژ می دهد، تمرکز ماساژ روی پا. وقتی کار می کند نور آبی است.
	نرم: عملکرد خودکار ماساژ. تمرکز ماساژ روی پا و کف پا. وقتی کار می کند نور آبی است.



نمودار کشیدن دوشاخه

ویژگی خودکار خاموش شدن پس از ماساژ در مدت ۲۰ دقیقه. چراغ برق چشمک می زند و در حالت آماده به کار قرار می گیرد.

Note

۱. اگر غالباً از محصول استفاده نمی کنید، آنرا خاموش کنید و از برق جدا کنید.
۲. برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه در هنگام ماساژ و قبل یا بعد از استفاده، روی آن نایستید.

هشدارهای ایمنی

۱. هشدارهای ایمنی

- لطفا طبق دستورالعمل های این دفترچه از محصول استفاده نمایید.
- لطفا اطمینان حاصل کنید که قدرت اصلی برای این محصول مناسب است، اگر کابل برق آسیب دیده باشد.
- از این محصول استفاده نکنید.
- اجازه ندهید که هیچ ماده خارجی وارد فاصله بین سری ماساژ و پوشش شود
- به منظور اجتناب از شوک الکتریکی و یا صدمه به دستگاه اجازه ندهید آب داخل دستگاه شود.
- پس از اتمام کار با دستگاه حتما پریز آن را از برق خارج نمایید.
- با دست های خیس دوشاخه را از برق نکشید.
- فشار زیادی به کابل هنگام وصل کردن یا جدا کردن وارد نکنید.
- جریان مدار محصول را تغییر ندهید و به سیم ها صدمه نزنید.
- از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراثحت نبینید.
- از لوازم جانبی که توصیه نشده است استفاده ننمایید.
- در فضای بیرونی از این محصول استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از جراثحت، لطفا قدرت عملکرد ماساژ را بیش از حد بالا نبرید.
- تا یک ساعت پس از صرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.
- در زمان عملکرد غیر عادی دستگاه از آن استفاده نکنید و لطفا بلافاصله با نزدیکترین شعبه نمایندگی خود مشورت کنید.
- در صورت بروز هرگونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از محصول، با پزشک معالج خود مشورت کنید.
- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد.

• چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می باید توسط تولیدکننده، نمایندگان خدماتی آن و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.

۲. محیط استفاده

- لطفا در دمای بالا و یا مرطوب مانند حمام از محصول استفاده نفرمایید.
- لطفا بلافاصله پس از تغییر ناگهانی دمای محیطی از محصول استفاده نفرمایید.
- لطفا در شرایط محیطی سخت و غبار آلود از محصول استفاده نفرمایید.

۳. افرادی که مجاز به استفاده از محصول نیستند:


- خانم ها در دوران بارداری و یا قاعدگی
- افرادی که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.
- افراد مبتلا به پوکی استخوان
- افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند و یا اشخاصی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می باشند.
- افرادی که دچار تب هستند.
- افراد مبتلا به هر نوع بیماری پوستی

هشدارهای ایمنی


- کودکان زیر ۱۴ سال و یا افرادی که تعادل روانی ندارند نمی باید بدون حضور یک ناظر از این دستگاه استفاده کنند.
- افرادی که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند.
- افراد با بدن خیس
- در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.
- در صورتی که عمل جراحی داشته اید پیش از استفاده با دکتر مشورت کنید.
- این وسیله یک روبه گرم دارد اشخاصی که به گرما حساس هستند می باید در زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند.

عملکرد

- دستگاه ماساژ پا ماساژ کامل کیسه هوا دارای طراحی دوبعدی است، با عملکرد برش در بالای صفحه، نگاه رمان و شیک
- ماساژ کیسه هوا و ماساژ گوی پا: با استفاده از فن آوری فشار هوا ماساژ مندلی، با قدرت نرم و احساس استریوسکوپیی.
- تکنیک های ماساژ، انعطاف پذیر و قابل تغییر است. قدرت از ضعیف به قوی برای تحریک عمق نقاط طب سوزنی است.
- سه درجه تنظیم شدت، پنج نوع برنامه و ۱۷ ترکیب مختلف ماساژ: ترکیب چند برنامه برای مشتری که به سلیقه خود انتخاب کند.
- ماساژ چند زاویه: زاویه قابل تنظیم (۰-۹۰ درجه) برای دستیابی به بهترین نتایج. کلید پائین تا زاویه ۲۰ درجه را پشتیبانی می کند تا برای ماساژ زانو بالا بیاید.
- حرارت مادون قرمز دور: عملکرد گرما با اثر حرارتی درمانی.
- ماساژ کامل: محدوده ماساژ وسیع است، از پا تا کف پا، ران و زانو.
- ایمنی: اگر برق به طور ناگهانی در هنگام ماساژ قطع شود، می توان آن را به صورت خودکار تخلیه نگه ندارد.
- پس از ۲۰ دقیقه، عملکرد خودکار خاموش شدن به طور خودکار کار خواهد کرد.
- پارچه با زیپ جدا می شود و می توان آن را تمیز کرد.

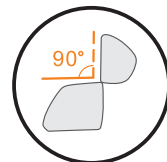

چرخش ساق پا


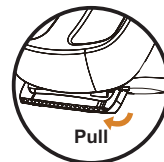


قاب عقب چرخشی



چرخ عقب

نام و عملکرد اجزا

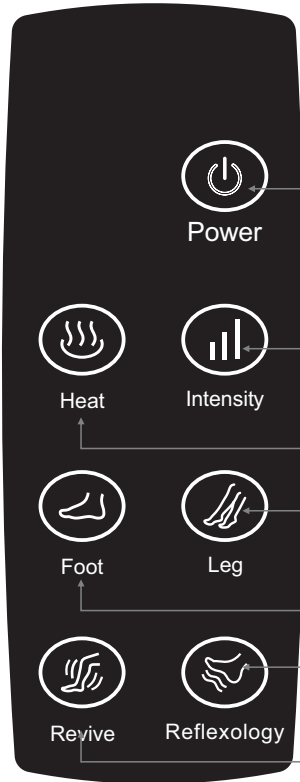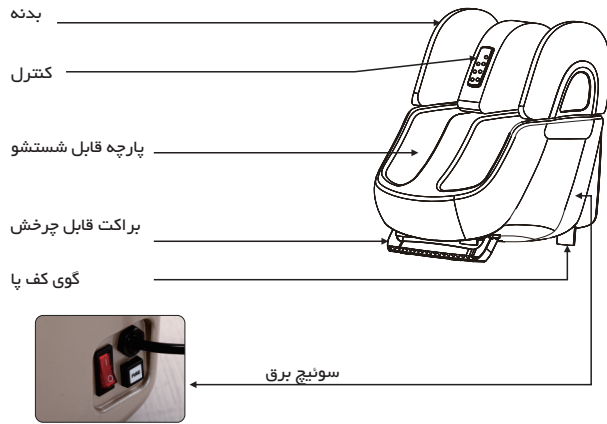

هنگامی که خاموش روشن می کنید، دستگاه تنظیم مجدد می شود.

قدرت ماساژ (ضعیف، متوسط و قوی)

روشن / خاموش کردن عملکرد گرمایش

فعال / غیر فعال کردن ماساژ، تمرکز ماساژ روی ساق پا

روشن / خاموش کردن عملکرد ماساژ کف پا، تمرکز ماساژ روی کف پا.

عملکرد ماساژ اتوماتیک: ماساژ کامل روی پای و کف پا

عملکرد ماساژ خودکار: تمرکز ماساژ روی پا