



SL - C30 LEG Massage
زیبایی پا با رولینگ

شماره سند: A - C30 - 72F0206

نام	Teo-tier Leg Beautician With Roller		
مدل	SL-C30		
ولتاژ مصرفی	110-120V~ 60Hz	<input type="checkbox"/>	
	220-240V~ 50Hz/60Hz	<input type="checkbox"/>	
توان مصرفی	110W		
زمان استفاده	15Minutes		

دستورالعمل استفاده :

روش استفاده :

دوشاخه را وارد پریز نمایید. چراغ نمایشگر پاور شرایط استفاده آنرا نمایش می دهد.



شکل دو شاخه و پریز



دکمه روشن کردن

 فریم چرخان	بر طبق نیازتان می توانید با کمک دست فریم را بالا ببرید قسمت جلویی می تواند اندازه ۲۰ درجه بالا بیاید
 خاموش / روشن	دکمه on/off را فشار دهید و ماساژور شروع به کار می کند با توجه به نیاز شما ، می توانید مدلهاى مختلف ماساژ و سرعت متناسب با آن را انتخاب کنید شما می توانید برنامه گرما درمانی را با استفاده از دکمه گرما درمانی روشن و خاموش کنید.
 توقف	با فشار دکمه stop برنامه های ماساژ و گرما درمانی متوقف می شود و دکمه power به حالت چشمک زن خواهد بود و در حالت standby قرار می گیرد

برنامه اتوماتیک توقف بعد از ۱۵ دقیقه استفاده آنرا به طور خودکار خاموش می کند و دکمه روشن / خاموش (power) آن در حالت چشمک زن می شود و در حالت standby قرار می گیرد



شکل صحیح جدا کردن دوشاخه از پریز



هشدارهای مهم امنیتی :

- اجازه ندهید هیچ جسم خارجی وارد فضای بین قسمت پایینی و بالایی آن وارد شود
- از کارهایی که باعث می شود دستگاه در معرض آب قرار بگیرد اجتناب کنید
- اگر کابل و یا دوشاخه آن آسیب دیده است آن را خودتان تعمیر و یا تعویض نکنید لطفاً با نماینده خدمات تماس بگیرید
- لطفاً مطمئن شوید که جریان برق ورودی متناسب با دستگاه باشد
- لطفاً برای جلوگیری از هر گونه آسیب به دستگاه و خودتان بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن، آنرا از برق جدا کنید
- لطفاً دستگاه را بر طبق دستورالعمل آن استفاده کنید
- اگر دوشاخه و کابل دستگاه خراب شده است از آن استفاده نکنید
- اگر از مشروبات الکلی استفاده کردید و یا احساس ناخوشی می کنید از این دستگاه استفاده نکنید
- برای جلوگیری از جراحات از این محصول با شدت زیاد استفاده نکنید
- برای جلوگیری از گرمای زیاد، دستگاه را بیش تر از ۱۵ دقیقه روشن نکنید
- از این دستگاه تا یک ساعت بعد از غذا استفاده نکنید
- اگر دارای جراحی در گردن و یا کمر هستید یا اخیراً عمل جراحی انجام داده اید لطفاً از این دستگاه با دقت و بر طبق توصیه پزشک تان استفاده کنید

محیط استفاده از دستگاه

- از این دستگاه در محیطهایی که تغییر شدید دمای هوا وجود دارد استفاده نکنید
- از این دستگاه در آب و هوایی که خیلی مرطوب است مانند حمام استفاده نکنید
- از این دستگاه در زمانی که گرد و خاک زیاد است و یا گازهای تند و تیز وجود دارد استفاده نکنید
- از این دستگاه زمانی که با یک پتو و یا بالشت پوشیده شده است استفاده نکنید

افرادی که نباید از دستگاه استفاده کنند

- افرادی که دارای بیماریهای پوستی واگیردار هستند
- بیمارانی که مبتلا به پوکی استخوان هستند
- بیمارانی که ناراحتی قلبی دارند و یا کسانی که قلبشان با بطری می تپد
- افرادی که دارای تب بالا هستند
- زنان در دوران بارداری و یا قاعدگی
- کسانی که صدمه دیده اند و یا هر جایی از بدنشان که جراحی سطحی دارند
- این دستگاه در حین کار گرما ایجاد می کند کسانی که به گرما حساسیت دارند وقتی از این دستگاه استفاده می کنند باید مواظب باشند
- بچه های زیر ۱۴ سال و یا افرادی که مشکلات ذهنی دارند نباید بدون حضور یک نظر از آن استفاده کنند
- کسانی که بر طبق نظر پزشک نیاز به استراحت دارند و یا کسانی که حالشان خوب نیست
- وقتی بدنشان خیس و مرطوب است از این دستگاه استفاده نکنید

• این دستگاه را برای حیوانات خانگی استفاده نکنید



پیشگیری نگهداری :

- هنگامی که دستتان خیس است این دستگاه را به برق وصل نکنید و یا از برق جدا نکنید
- سیم دستگاه را هنگامی که داخل پرز است نکشید
- این دستگاه برای اشخاصی که توانایی حرکتی یا مغزی کمی دارند و یا اینکه تجربه استفاده از آنرا ندارند و یا دانش کافی در مورد آن را ندارند طراحی نشده است مگر اینکه بر کار آنها نظارت شود و یا اینکه نحوه ی استفاده از دستگاه به فردی که از بیمار نگهداری می کند آموزش داده شود
- مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند
- به سیم برق آن صدمه نزنید و مدار جریان محصول را تغییر ندهید
- لطفاً هنگامی که برق دستگاه قطع می شود از آن استفاده نکنید به منظور جلوگیری از هر گونه صدمه ای که هنگام وصل شدن ناگهانی برق رخ می دهد
- لطفاً هر گاه متوجه شدید که در حین استفاده دستگاه به طور عادی کار نمی کند استفاده از آنرا متوقف کنید و به مسئول خدمات پس از فروش شرکت اطلاع دهید
- اگر سیم دستگاه آسیب دید برای جلوگیری از خطر آن بایستی توسط کارخانه و یا نماینده خدمات تعویض شود

برنامه ها

- ۱) ماساژ پای جدید با ماساژ کامل ایریگها طراحی شده در دو بخش بالایی و پایینی با برنامه قابل بازگشت طراحی جدید و به روز
- ۲) دارای ۳۰ ایریگ در قسمت رانها و ساق پا و جلوی پا می باشد و همچنین مجهز به ۳ رولینگ در قسمت کف پا می باشد که مایچه های پا را ماساژ میدهد و نقاط رفلکسی پا را تحریک می نماید.
- ۳) عملکرد ارگانیک ماساژ ماشینی و رولینگ بیشترین میزان احساس راحتی را برای شما فراهم می کند و باعث می شود شما احساس کنید که سر شار از انرژی هستید و موثر جهت رفلکسولوژی و زیبایی پا ها می باشد

۴) فیبرهای گرمایی در نواحی ران، مچ پا و پنجه پا تاثیر گرما درمانی دارد

۵) قسمت بالایی و پایینی می تواند ۱۴۰ درجه بالا و پایین برود و با دسته ای که در زیر ماساژور تعبیه شده و قابلیت جابه جایی تا ۲۰ درجه را دارد شما می توانید براحتی ماساژ بگیرید



پای قابل حرکت



فریم قابل حرکت




چرخ عقب

۶) پا چرخهایی که در زیر آن تعبیه شده است می تواند دستگاه براحتی حرکت کند

۷) دستگاه دارای ۳ مدل ماساژ هوا اختصاصی در سه سطح حساسیت، سه نوع متد ماساژ رولینگ می باشد. در مدل اتوماتیک نوع ماساژ رولینگ در مدت یک دقیقه به نوع دیگر تغییر کند و همچنین مدل دستی می تواند به مدل اتوماتیک تغییر کند

۸) بعد از ۱۵ دقیقه ماساژ، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود

۹) روکش دستگاه دارای زیپ می باشد که کاربر می تواند برای شستشو به آسانی آن را جدا نماید

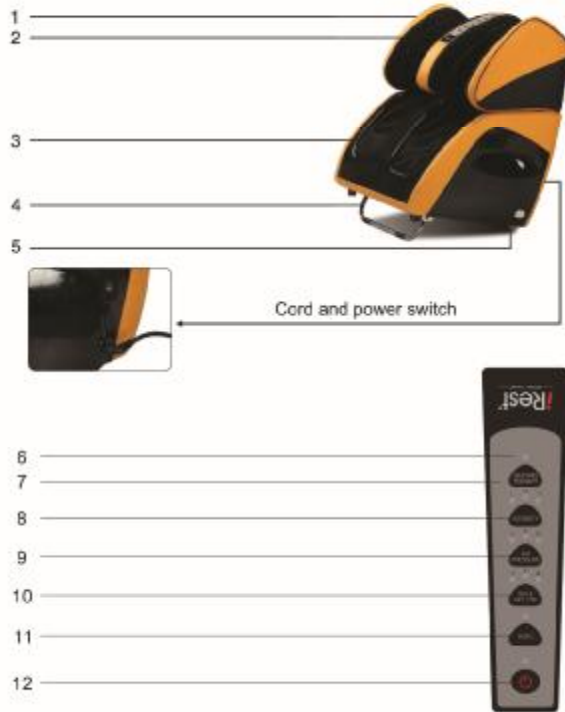

1	بدنه دستگاه
2	کنترل دستگاه
3	کاور قسمت ماشینی
4	پایه دستگاه
5	چرخ عقب
6	چراغ LED نمایشگر
7	گرما درمانی
8	شدت ماساژ ایریگ
9	مدل های فشار ایریگ
10	مدل رولینگ
11	اتوماتیک
12	خاموش / روشن