

ماساژور همراه

SL-C503-9

دفترچه راهنمای فارسی

از این که این محصول را خریداری کرده‌اید متشکریم.
لطفا دستورالعمل‌های این دفترچه را قبل از استفاده‌ی دستگاه به
دقت مطالعه فرمایید.

لطفا توجه بیشتری به نکات ایمنی داشته باشید و این
دفترچه را به طور مناسب برای استفاده در آینده نگهداری فرمایید.

توجه: کمپانی حق این را دارد که طراحی و دستورالعمل‌های این
دفترچه را بدون هیچ گونه اطلاع قبلی تغییر دهد.

محتوا

۰۲	هشدارهای مهم ایمنی
۰۴	نام و عملکرد اجزا
۰۵	روش استفاده
۰۷	عیب‌یابی
۰۸	حمل و نقل و انبارش
۰۸	مشخصات محصول



هشدارهای مهم ایمنی

۱. هشدارهای ایمنی

این محصول برای افراد دارای ناتوانی جسمی، حسی، کسانی که مشکلات عصبی دارند و یا افراد کم تجربه و دارای حس غیر عادی (افرادی که درد و... را حس نمی‌کنند) مناسب نیست مگر اینکه تحت نظر و راهنمایی شخصی باشند که مسئول ایمنی آنها هنگام استفاده از دستگاه می‌باشد. کودکان باید تحت نظر باشند تا اطمینان حاصل گردد که با دستگاه بازی نمی‌کنند. لطفاً جهت استفاده از دستگاه به این دفترچه راهنما توجه فرمایید.

لطفاً از کابل شارژی که مخصوص این دستگاه است استفاده کنید و با از کابل شارژی استفاده کنید که جریان ۲ آمپر یا بیشتر داشته باشد.

ریختن آب بر روی دستگاه ممنوع است تا از اتصال کردن دستگاه جلوگیری شود.

لطفاً بعد از استفاده و یا قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید تا از آسیب به دستگاه و یا آسیب به خودتان جلوگیری شود.

کابل شارژ را با دست خیس به دستگاه وصل نکنید یا از دستگاه نکشید.

لطفاً جهت وصل کردن یا کشیدن کابل شارژ از دستگاه بیش از اندازه به دستگاه فشار وارد نکنید.

لطفاً به سیم دستگاه آسیب نرسانید و جریان مداری دستگاه را تغییر ندهید.

افراد دارای پوست حساس، سری ماساژ را با حوله بپوشانید و یا قبل از استفاده از دستگاه لباس خشک و تمیز بپوشید. (منظور استفاده از دستگاه ماساژ از روی لباس است).

انداختن محصول در آتش و یا قراردادن محصول نزدیک منبع آتش ممنوع می‌باشد.

هرگونه تغییر ایجاد کردن در دستگاه بدون مجوز ممنوع می‌باشد.

انگشتان، موها و یا هر قسمت دیگر از بدن را از محور گوی ماساژ و سوراخ‌های نخلیه گرما

دور نگه دارید تا از قطع و آسیب به اجزای بدن جلوگیری شود.

از وارد آوردن فشار بیش از حد، ضربه و کوبیدن بیش از حد در هنگام استفاده از دستگاه خودداری فرمایید.

از تجهیزات جانبی و اتصالات توصیه نشده استفاده نکنید.

اگر هنگام استفاده از دستگاه به مورد غیر عادی برخورد کردید، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با تیم خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۰۴۴۹۰۰ - ۰۹۱۲۸۱۹۷۴۷۹



هشدارهای مهم ایمنی

۲. محیط استفاده

از این محصول در محیط دارای رطوبت زیاد مانند حمام استفاده نکنید.
از این محصول بلافاصله بعد از تغییرات آب و هوایی ناگهانی استفاده نکنید.
از این محصول در محیط دارای گرد و خاک زیاد و یا دارای گازهای خورنده استفاده نکنید.

۳. افرادی که نباید از این دستگاه استفاده کنند

خانجهای باردار و خانجها در دوران قاعدگی

افراد دارای بیماری پوستی مسری

افراد مبتلا به پوکی استخوان

افراد دارای بیماری قلبی و یا افرادی که از دستگاههای الکترونیکی در داخل بدن خود استفاده می‌کنند
مثل باتری قلب

افراد دارای تب بالا

افراد که دارای جراحی هستند و یا از هرگونه بیماری سطحی روی بدن خود رنج می‌برند.

کودکان زیر ۱۴ سال و یا افرادی که دارای تعادل ذهنی نیستند بدون حضور سرپرست خود اجازه استفاده از دستگاه را ندارند.

افراد که با توجه به توصیه دکتر باید استراحت کنند و یا افرادی که احساس خوبی ندارند.


افراد با بدن خیس

افراد که تحت تاثیر الکل هستند و یا افرادی که دارای احساس ناخوشایند هستند.

لطفاً اگر اخیراً تحت عمل جراحی بوده‌اید برای استفاده از دستگاه با دکتر خود مشورت کنید.

دستگاه در اثر استفاده زیاد گرما ایجاد می‌کند. افرادی که به گرما حساس هستند باید هنگام استفاده از دستگاه مواظب باشند.

نام و عملکرد اجزا

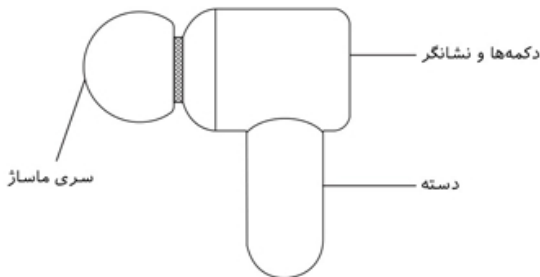


سرّی دایره‌ای شکل: مناسب برای ماساژ گروه ماهیچه‌های بزرگ مانند بازوها، پشت، نشیمنگاه، ران‌ها و ماهیچه‌های ساق پا

سرّی استوانه‌ای: مناسب برای ضربه زدن به بافت‌های عمیق مانند کف دست و کف پا.

سرّی لاشکل: مناسب برای گردن، ستون فقرات و تاندون آشیل

سرّی صاف: مناسب جهت رپلکس کردن و شکل دادن به ماهیچه‌های مختلف بخش‌های مختلف بدن

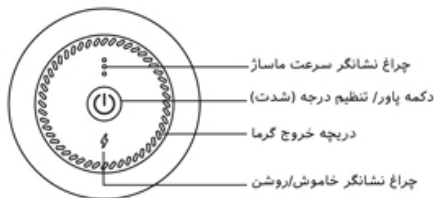

دستورالعمل استفاده:

دکمه برجسته واقع شده در وسط کنترل پنل دکمه پاور و دکمه کنترل سرعت می‌باشد. جهت روشن یا خاموش کردن دستگاه دکمه را فشار داده و ۲ ثانیه نگه دارید.

دستگاه را روشن کنید، دستگاه با سطح ۱ شروع به کار می‌کند. دکمه خاموش/روشن را به صورت مداوم فشار دهید تا سرعت بین سطح ۱ الی سطح ۶ تغییر یابد و دوباره به سطح ۱ برگردد.

دکمه را به صورت سریع دو بار فشار داده و هر سه چراغ شروع به چشمک زدن می‌کنند.

دستگاه در حالت هوشمند قرار گرفته و دستگاه سرعت را به صورت اتوماتیک با توجه به قدرت و یا فشاری که به آن وارد می‌آورید تنظیم می‌کند. هنگامی که دستگاه خاموش شد، دکمه را به صورت آهسته فشار دهید تا میزان ذخیره باتری را نشان دهد.

چراغ نشانگر به آرامی به رنگ قرمز چشمک می‌زند، نشانگر این موضوع است که دستگاه در حال شارژ است. هنگامی که رنگ چراغ نشانگر سبز شد، نشان دهنده این موضوع هست که دستگاه به طور کامل شارژ شده است.

۰ الی ۵ درصد چراغ نشانگر به سرعت به رنگ قرمز چشمک می‌زند (روشن کردن دستگاه در این حالت ممنوع است و دستگاه باید در سریع ترین زمان ممکن شارژ شود).

ظرفیت باتری ۵ الی ۳۰ درصد چراغ نشانگر قرمز است، ظرفیت باتری ۳۰ الی ۶۰ درصد، چراغ

نشانگر زرد است، و ظرفیت باتری ۶۰ الی ۱۰۰ درصد چراغ نشانگر سبز است.

حدود ۲ الی ۳ ساعت زمان لازم هست تا دستگاه به طور کامل شارژ شود، به محض اینکه دستگاه به طور کامل شارژ شد، به مدت ۴ ساعت قابل استفاده می‌باشد.

روش استفاده

جهت جلوگیری از ماساژ یک نقطه از بدن برای مدت طولانی و جلوگیری از آسیب به ماهیچه‌ها و استخوان‌ها، دستگاه مجهز به سیستم هوشمند می‌باشد و بعد از ۱۰ دقیقه کار مداوم، خاموش می‌شود. جهت استفاده مجدد از دستگاه، دکمه پاور را فشار دهید.
پورت شارژر در قسمت پایین پنل نشانگر قرار گرفته است.

بر اساس سیستم لרزشی فرکانس بالای قوی، سودمند و تحریک کننده، این محصول می‌تواند به طور عمیق در بافت‌ها و عضلات نفوذ کند و به سرعت اسید لاکتیک جمع شده پس از ورزش را تجزیه کند و بافت‌های ماهیچه‌های سفت و سخت که دچار گرفتگی شده را ریلکس کند.



گروه ماهیچه‌های شانه
سه بار به مدت ۱۵ الی ۲۰ ثانیه



گروه ماهیچه‌های سینه
۳۰ ثانیه



گروه ماهیچه‌های پشت
۳ بار به مدت ۳۰ ثانیه الی ۱ دقیقه



گروه ماهیچه‌های نشیمنگاه
۴ بار به مدت ۳۰ ثانیه الی ۱ دقیقه



گروه ماهیچه‌های ران‌ها
۳ بار به مدت ۲۰ الی ۳۰ ثانیه



گروه ماهیچه‌های ساق پا
۳ بار به مدت ۲۰ الی ۳۰ ثانیه

این محصول فقط برای بهبود فیزیکی و مراقبت از سلامتی است نه به عنوان محصول پزشکی.

روش استفاده

موارد منع مصرف:

بدون اجازه پزشک، این محصول نباید تحت هیچ کدام از شرایط زیر استفاده شود:

اگر شما باردار هستید، از عوارض دیابت رنج می‌برید (مانند neuropathy و یا آسیب شبکه چشم)، صرع یا میگرن، دیسک فنتک شده، بیماری لغزش مهره‌های کمر (Spondylolisthesis)، بیماری ستون فقرات (Spondylosis) یا بیماری شکستگی استرسی مهره کمر (Spondylolysis)، افراد دارای باتری قلبی، افرادی که اخیراً تعویض مفصل انجام داده‌اند، افراد داری IUD یا پلاستین در بدن و یا افرادی که اخیراً تحت عمل جراحی بوده‌اند و یا هرگونه مشکل دیگری که مربوط به سلامتی است دارند.

عیب یابی

راه حل مشکل	دلیل	عیب ابتدایی
اگر دکمه پاور خاموش است دستگاه را شارژ کنید	دکمه پاور خاموش است	دستگاه روشن نمی‌شود
سیم و آداپتور را به درستی متصل کنید	چک کنید که آیا آداپتور به سیم به درستی متصل شده است یا خیر	دستگاه شارژ نمی‌شود
اگر آسیب دیده است یا نمایندگان پس از فروش تماس حاصل فرمایید.	چک کنید که سیم و یا پورت USB آسیب دیده یا خیر	
شارژر ارائه شده با خود دستگاه را استفاده کنید.	چک کنید آیا آداپتور مناسب دستگاه است یا خیر؟	
مجددا شارژ کنید.	باقیمانده شارژ را چک کنید، آیا شارژ باقیمانده ضعیف (کم) است؟	دستگاه روشن می‌شود، ولی عمل نمی‌کند

اگر هنگام استفاده از دستگاه مشکلی پیش آمد، دستگاه را با توجه به روش‌های بالا چک کنید. اگر نتوانستید مشکل را پیدا کنید و یا اگر دستگاه باز هم کار نمی‌کند، لطفاً دکمه پاور را خاموش کنید و با خدمات پس از فروش جهت تعمیر دستگاه تماس بگیرید.

حمل و نقل و نگهداری

۱. دما:
دستگاه را در محیط خشک و خنک نگه دارید.
۲. رطوبت نسبی:
دستگاه را در رطوبت بیش از ۸۰ درصد، محیط داری گازهای خورنده نگه داری نکنید. محصول را در جایی نگه داری کنید که دارای تهویه مناسب باشد.
۳. حمل و نقل:
دستگاه باید از باران، برف، وارونگی دما و تصادف (برخورد) دور نگه داشته شود. اگر دستگاه برای مدت بیش از ۶ ماه انبار شده است، دستگاه باید چک شود و به مدت نیم ساعت شارژ شود.
محل انبار باید دارای تهویه مناسب باشد، دور از تابش نور خورشید و عاری از گازهای خورنده باشد.

مشخصات محصول

- مدل: C503-9
نام: Mini Fascia Gun
زمان مورد استفاده: ۱۰ دقیقه
توان مورد استفاده: ۲۰ وات
ولتاژ مورد استفاده: ۵ ولت = ۲ آمپر
رابط شارژر: Type-C
ظرفیت باتری لیتیومی: ۷/۴ ولت ۱۸۰۰mAh
زمان مورد نیاز برای شارژ: ۲ ساعت
زمان نگه داشتن شارژ: ۲ ساعت
ساخت حفاظ محصول: 